



Accesorios



Instrumentos de Diagnóstico

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO

CAT#	DESCRIPCIÓN
9-7005-00	<p>El Equipo de Diagnóstico incluye: Mango con baterías Cámara de otoscopio</p> <p>Auriculares: Tamaño de 2.5, 3.5, & 4.5mm Espéculo nasal tipo tornillo Cabeza de oftalmoscopio Abatelenguas metálico Soporte para lengua con iluminación Espejo laríngeo No. 3 Espejo laríngeo No. 4 Soporte de lengua para piezas de madera</p>



OTOSCOPIO

- Con conexiones estándares
- Mango de latón cromado
- Auriculares que son reutilizables y esterilizables en autoclave
- Empacado individualmente en una bolsa con cierre
- Con un adaptador disponible que le permite usar puntas desechables para espéculos Welch Allyn.



CAT#	DESCRIPCIÓN
9-7004-20	<p>El Otoscopio incluye: Mango con baterías Cámara de otoscopio</p> <p>Auriculares: Tamaño de 2.5, 3.5, & 4.5mm</p>
9-7004-05	<p>Adaptador para puntas desechables para uso en espéculos Welch Allyn</p>



Accesorios



Estimuladores de Nervios

Estas unidades, aunque pequeñas, ofrecen una salida suficiente que asegura un ajuste completo de la corriente de 0 a 70 mA. Cada unidad incluye un manual de instrucciones, electrodos de bola, batería y cables conductores con caimanes.

ESTIMULADOR MICRO STIM

- Salida variable: 0-70 mA
- Funciones del interruptor:
 - Espasmo: 1 impulso por segundo
 - Tétanos: 100 Hz
 - Secuencia integrada de cuatro: 4 impulsos cada 2 segundos
 - Posición de espera: Descarga en batería baja
- Luces indicadoras de impulsos: La luz roja parpadea cuando hay que reemplazar la batería
- Batería estándar: alcalina de 9 voltios
- Liviano: 7 onzas incluyendo la batería



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
8-1053-60	Estimulador de Nervios Micro Stim	1

ESTIMULADOR MICROSTIM PLUS

- Doble descarga: 2 descargas de 60 ms de 50 Hz separadas cada una por .75 s
- Espasmo: 1 s (1 impulso/s)
- Tétanos: De 50 Hz (50 impulsos/s) o de 100 Hz (100 impulsos/s)
- Secuencia integrada de cuatro: Única (4 impulsos/2 s)
- Corriente de salida: Ajustable, 0-70 mA
- Impulso de estímulo: Impulsos monofásicos de onda cuadrada (200- μ s de duración)
- Indicadores: El LED de batería (verde) indica que la unidad está encendida, y parpadea con batería baja
- El LED de impulsos (rojo) parpadea y se escucha un indicador audible cada vez que se genera un impulso de estímulo
- Se ha incrementado la vida útil de la batería



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
8-1053-62	Estimulador de Nervios Micro Stim Plus	1

ACCESORIOS PARA LAS DOS UNIDADES

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
8-1053-76	Electrodo de bola de estímulo y espiga hueca	1
8-1051-78	Espiga de 6' de conexión rápida y capuchón	1
8-1051-79	Espiga de estímulo de 6' de caimán y capuchón	1
8-1050-09	Bolsa de vinilo para transporte	1



Accesorios



Estetoscopios



DE CABEZA DOBLE

- Tubo en "Y" moldeado en una sola pieza
- Hipersensible y liviano
- Anillo no frío
- Cápsula de aluminio anodizado
- Audífonos biauriculares de latón cromado
- Puntas auditivas de plástico blanco
- Longitud general de 31"


CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
6-0027-40	Cabeza Doble, Negro	1
6-0027-41	Cabeza Doble, Rojo	1
6-0027-42	Cabeza Doble, Gris	1
6-0027-43	Cabeza Doble, Verde	1
6-0027-60	Cabeza Doble, Negro	10
6-0027-61	Cabeza Doble, Rojo	10
6-0027-62	Cabeza Doble, Gris	10
6-0027-63	Cabeza Doble, Verde	10

RAPPAPORT SPRAGUE

Elimina la necesidad de usar estetoscopios diferentes en infantes, niños y adultos. La selección de las cabezas apropiadas permite tener las respuestas acústicas deseadas con sonidos de frecuencia baja, media y alta. Un tubo grueso de 22" y una selección de puntas auditivas ayudan a reducir la fuga de sonidos y los ruidos extraños. El equipo completo consta de estetoscopio y un juego de accesorios. Su longitud general es de 29".

EL JUEGO INCLUYE:

- 1 par de puntas auditivas de plástico negro
- 3 campanas abiertas para: infante, niño y adulto
- 1 par de puntas auditivas de hule suave (tipo hongo)
- Diafragmas para adulto y pediátrica

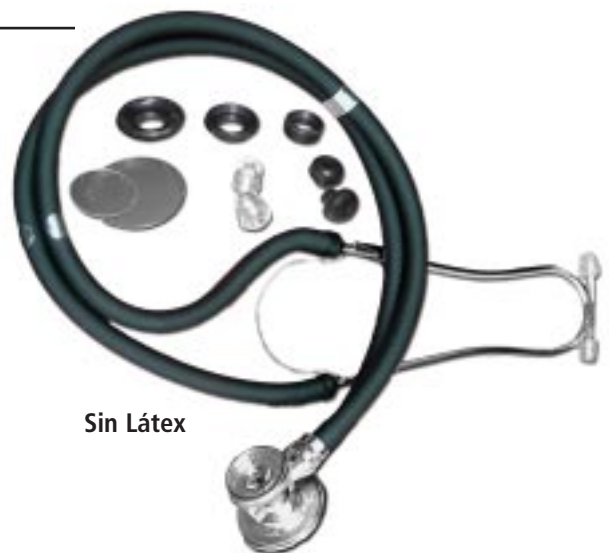

Sin Látex

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
6-0028-00	Rappaport Sprague, Negro	1
6-0028-50	Rappaport Sprague, Negro	10



Accesorios



Monoscopió / Duoscopio

MONOSCOPIÓ DESECHABLE COMFORT FIT™

- Sin Látex

La transmisión del sonido a través de este sistema (auricular, tubos y cabeza de estetoscopio) depende de un sellado total en el sistema. En la parte del paciente esto no es difícil de lograr. Por la parte del anestesista esto es más difícil, debido a la forma irregular y variable del canal auditivo. El auricular de Comfort Fit™ responde perfectamente a esta necesidad.

El hule espuma se comprime, se inserta en el canal auditivo y lentamente se expande para formar un sello perfecto de baja presión con la pared del canal. Este sello es determinante debido al volumen bajo de los sonidos transmitidos. La poca presión ejercida sobre la piel del canal auditivo permite que el auricular sea más cómodo, lo cual ayuda a una mejor revisión. El monitoreo significa vigilancia. El tubo tiene un largo de cuatro pies.

CON CONEXIÓN AL:

- Estetoscopio Esofágico
- Cápsula Wenger




CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
6-1030-25	Monoscopió Comfort Fit	25

DUOSCOPIO

- Sin Látex

Se trata de un estetoscopio biauricular estándar, diseñado específicamente para el anesthesiólogo con el fin de proporcionarle la máxima comodidad y eficacia. El tubo que va de la pieza en "Y" al conector luer hembra es extra largo (36"), lo que permite un amplio movimiento lateral alrededor del paciente sin desconectarse. Incluye una conexión luer hembra.

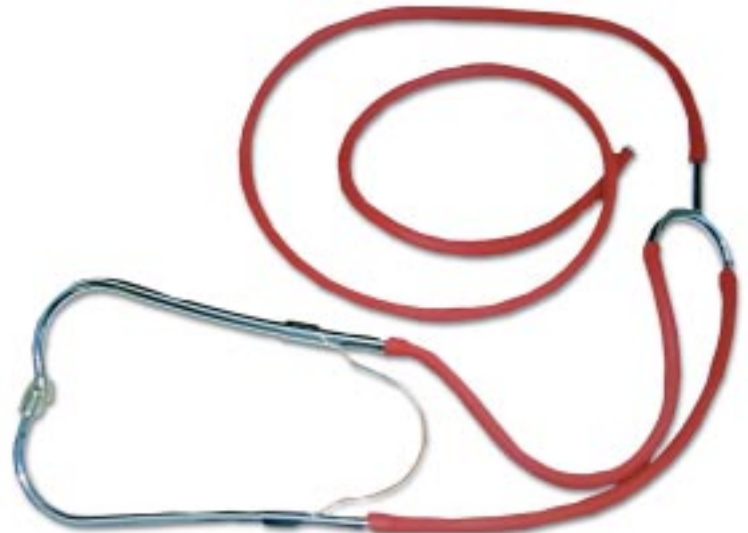

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
6-0030-00	Duoscopio - Estetoscopio	1



Accesorios



Cápsulas Wenger Estetoscopios Precordiales

CÁPSULAS

CÁPSULAS PARA INFANTES

Fabricadas en acero inoxidable ligero, estas cápsulas de uso infantil se caracterizan por su diseño hueco y su superficie redonda y lisa para el pecho, lo cual las hace ideales para usarse con los recién nacidos y los infantes.

CÁPSULAS WENGER

Son cápsulas de una sola pieza hechas de acero inoxidable. Tienen cámaras sonoras relativamente profundas y cuentan con conectores Luer para acoplarse a los auriculares. Se les puede colocar sobre la depresión esternal donde pueden o no fijarse con cinta adhesiva.

- Todas las cápsulas cuentan con un conector luer macho de deslizamiento.
- De acero inoxidable y sin cromado que produzca escamas o descascarillado



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
6-0025-00	Cápsula para Neonatos, 7/8" de diámetro	1
6-0025-01	Cápsula para Infantes, 1-1/8" de diámetro	1
6-0025-02	Cápsula Wenger para Niños	1
6-0025-03	Cápsula Wenger para Adultos	1

DISCOS ADHESIVOS DOBLES

CAT#	DESCRIPCIÓN	ROLLO
6-0025-25	Discos Adhesivos Dobles	1



100 discos por rollo

JUEGO DE CÁPSULAS

JUEGO VIENE CON:

- Cápsula para adulto
- Cápsula para niño
- Cápsula para infante
- Cápsula para neonato
- 8 Discos adhesivos dobles
- 1 Monoscopio Comfort Fit™ desechable

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
6-0025-05	Juego de Cápsulas	1 Juego





Accesorios



Protector de Ojos, Protector Dental y Pinzas Nasales

IGuard™ PROTECTOR DE OJOS

Durante la anestesia general, proteja los ojos de su paciente de lesiones en la córnea, laceraciones y hemorragia escleral con el antifaz protector de IGuard. Este antifaz protector de plástico rígido y transparente se suministra con un cojín de hule espuma no alérgico para una aplicación rápida y precisa.

- Para uso personal del paciente
- Esterilizado
- Sin látex

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0210-00	Protector de Ojos IGuard, Esterilizado	25



PROTECTOR DENTAL DESECHABLE

Evita la rotura de los dientes durante una entubación, broncoscopia, laringoscopia, tonsilectomía, y extracciones dentales. Reduce las lesiones dentales: Un tercio de las demandas relacionadas con todas las negligencias ocurridas durante la anestesia se relacionan con daños a la dentadura al realizar una intubación.

- Tamaño para adulto
- Desechable
- Sin látex

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-3041-03	Protectores Dentales para Adulto	50



PINZAS NAsALES DESECHABLES

- Sin látex
- Desechable

CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
9-0134-44	Pinzas Nasales Desechables	100

